


# RESPIMAT

Bien utiliser mon dispositif d'inhalation



Maintenir l'inhalateur en position verticale.  
Tourner la base dans la direction des flèches noires imprimées sur l'étiquette jusqu'à entendre un déclic.

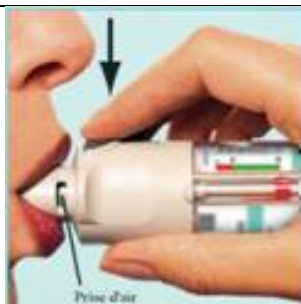

Ouvrir le capuchon jusqu'à ce qu'il s'ouvre complètement.  
Expirer lentement et complètement en dehors du dispositif.  
Fermer les lèvres autour de l'extrémité de l'embout buccal sans recouvrir les prises d'air.  
Tout en inspirant lentement et profondément par la bouche, appuyer sur le bouton de libération de la dose.  
Maintenir la respiration aussi longtemps que possible.  
Fermer le capuchon.