


# HANDIHALER


Bien utiliser mon dispositif d'inhalation

1

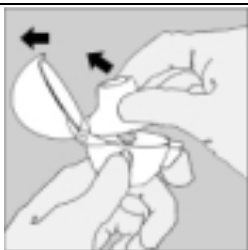


Relever complètement le capuchon anti-poussière en le tirant vers le haut puis ouvrir l'embout buccal en le tirant également vers le haut.

2

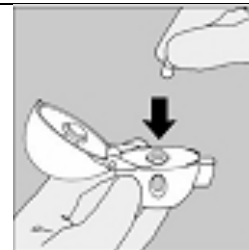

Prendre une gélule du blister et la placer dans la chambre centrale.

3

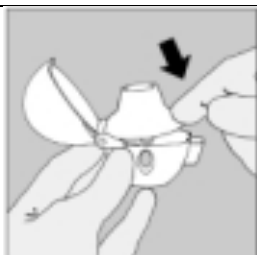

Refermer l'embout buccal jusqu'à entendre un clic et laisser le capuchon anti-poussière ouvert.

4




Tenir le dispositif vertical, l'embout buccal dirigé vers le haut et enfoncer complètement le bouton perforateur d'une seule pression puis relâcher.

5



Expirer à fond.  
Ne jamais expirer dans l'embout buccal.

6

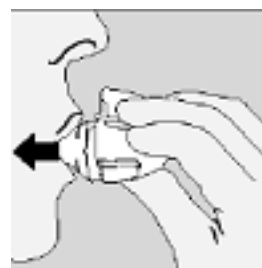

Porter le HandiHaler à votre bouche et refermer fermement les lèvres autour de l'embout buccal.

Maintenir la tête droite et inspirer lentement et profondément, à un rythme toutefois suffisant pour entendre ou sentir la gélule vibrer.

Inspirer jusqu'à remplir complètement les poumons, puis retenir la respiration aussi longtemps que possible et ôter le dispositif HandiHaler de la bouche.

7



Ouvrir à nouveau l'embout buccal et jeter la gélule dans les ordures ménagères.  
Refermer l'embout buccal et le capuchon anti-poussière.